



Diversey™

# Oxivir Plus Spray

## Detergente desinfetante de largo espectro

### Descrição

Oxivir Plus Spray da Diversey é um detergente desinfetante pronto a usar para utilização em superfícies duras não porosas e em algum mobiliário delicado.

### Propriedades

- Bactericida, virucida, leveduricida e fungicida
- Formulação ácida patenteada à base de peróxido de hidrogénio (AHP)
- Tempos de contacto reduzido
- Poder de limpeza efetivo
- Sem perfume

### Benefícios

- Testado de acordo com as diversas normas europeias e aprovado como desinfetante de largo espectro incluindo HIV, HBV, HCV, Avian Influenza, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE e Norovirus
- Limpa e desinfeta num só passo, reduzindo assim o tempo de trabalho
- Excelente poder de limpeza, incluindo descalcificação, dispensando assim a necessidade de limpeza prévia
- Seguro para os utilizadores. Não contém irritantes respiratórios
- Fórmula à base de AHP, não danifica as superfícies, aumentando o tempo de vida dos equipamentos
- Seguro para o ambiente. Os agentes ativos dão origem a água e oxigénio
- Adequado para usar em zonas de elevado risco no sector da saúde, como UCI, UCIN e enfermarias


### Instruções de utilização

#### Espuma de limpeza e desinfeção:

1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar pulverizando o pano ou diretamente na superfície, usando uma garrafa pulverizadora.
3. Após o tempo de contacto, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um toalhete

#### Dosagem:

Usar a puro.

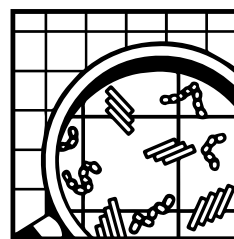

© A.I.S.E.



# Oxivir Plus Spray

## Dados Técnicos

Aspeto: Líquido amarelo, transparente

pH (em uso): 1,8

Densidade relativa (20 °C): 1,000

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com). Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso profissional/especialistas. Reage com substâncias oxidáveis.

## Compatibilidade do produto

Não misturar com outros produtos químicos. Não usar água quente. Não usar em superfícies sensíveis à água e a ácidos. Segundo as recomendações de utilização, Diversey Oxivir Plus Spray é adequado para uso na maioria dos materiais, não sensíveis a ácidos, normalmente encontrados.

## Dados microbiológicos

Eficácia comprovada de acordo com as normas europeias EN1276, EN13697, EN1650, EN13624, EN13727, EN16615, EN14476 e EN14348.

## Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) 648/2004, relativo aos detergentes.